

La société Dettki est une société sans prétention et avec succès et a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la technologie de mesure Vicat.

Client dispose d'un rang de priorité élevé:


- 24h appui des techniciens de maintenance
- Examen des besoins individuels des clients
- Le développement continu
- Contrats de maintenance variables (en option)

Nos systèmes sont impossibles à imaginer le monde dans le contrôle de la qualité et de la recherche & développement loin. Ils impressionnent par leur fiabilité et leur précision continue.

L'unicité est notre méthode de mesure d'étendre la gamme de mesure de sorte que vous obtenez beaucoup plus de perspicacité dans le comportement de réglage.




Cône

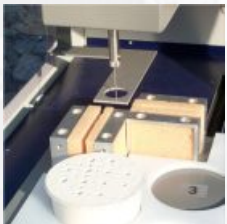

Aiguille

- Produits de différentes époques de réglage mesurés simultanément
- Travailler mesure seule, les problèmes de test sont résolus, les défauts de qualité a révélé sur le temps
- Précises des résultats de mesure, immédiatement comparables (mesure Vicat p.ex.:DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
- Mesures exactes par des intervalles de mesure dynamique et interpolation
- Mesure extension de gamme grâce à la mesure entièrement automatisé avec un maximum de trois charges (p.ex.100g & 300g & 1000g)
- Bas coûts d'installation car il n'ya pas de connexion de l'eau
- Alarme réglable si elles dépassent ou tombent en dessous de la tolérance
- Nettoyage entièrement automatique de l'échantillon
- Détection automatique des erreurs dans la masse d'épreuve
- Acquisition de données externes pour l'archivage
- Exportation de données vers toutes les bases de données principales

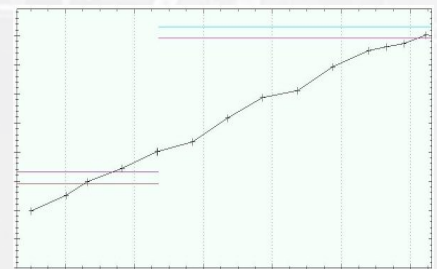

Représentation graphique de chaque échantillon



AVM-15²-P

- Mesure simultanée de 15 échantillons
- Deux charges (p.ex.100g & 1000g)
- Produits avec consistance liquide et solide
- Pupitre
- Système d'ordinateur & logiciel
- Système de stand L:800 P:1050 H:1750(2300)mm

AVM-15³-P

Identique AVM-15² cependant:

- Trois charges (p.ex.100g & 300g & 1000g)

AVM-Temp

Température du bain pour AVM-15^x



- Température +5°C de +50°C
- Niveau réglable
- Ensemble modulaire pour montage et démontage facile

AVM-Temp-6

Tempered 6 échantillons / 5 à l'extérieur

AVM-Temp-10

Tempered 10 échantillons




AVM-10²

- Mesure simultanée de 10 échantillons
- Deux charges (p.ex.100g & 1000g)
- Produits consistance Avec solide
- Système d'ordinateur & logiciel
- Système de table L:780 P:850 H:750(1300)mm

AVM-Hum-10

Mesurer avec 95% d'humidité dans le AVM-10^x (ASTM C 191)

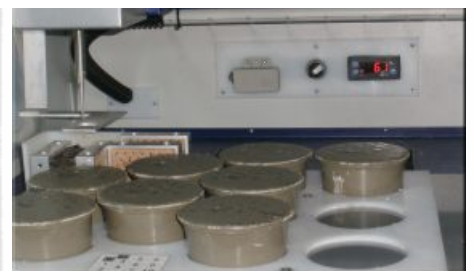

- Réglable jusqu'à 95% d'humidité relative
- Réalisation rapide de humidité de consigne

Options de mesure

■ AVM-10² / AVM-15²

- Cône 100g & 1000g
- Cône / Aiguille 100g & 300g
- Aiguille 300g & 1000g
- Individuellement 100-300g & 300-3000g

■ AVM-15³

- Cône / Aiguille 100g & 300g & 1000g
- Individuellement 100g & 300-400g & 500-3000g