

L'azienda è un Dettki stimabile e un'azienda di successo e ha oltre 20 anni di esperienza alla schiena settore del tecnologia di misurazione Vicat.

Il cliente ha una priorità:


- 24 ore di sostegno da parte di tecnici
- Considerazione dei singoli esigenze del cliente
- Il continuo sviluppo
- Contratti di manutenzione variabile (opzionale)

I nostri sistemi sono utilizzati in tutto il mondo nel monitoraggio della qualità ricerca e sviluppo non è più possibile immaginare. Essi colpiscono per la loro costante affidabilità e precisione.

L'unicità è il nostro metodo di misurazione per ampliare il campo di misura così si ottiene molto di più comprensione del comportamento di associazione di supporto.




cono

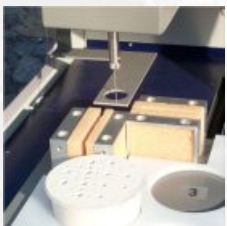

ago

- Prodotti di vari tempi di presa misurate simultaneamente
- Di lavoro misura indipendentemente, problemi di collaudo tempo sono chiusi, Scopri difetti di qualità sul tempo
- Preciso, risultati della misurazione immediatamente confrontabili (misurazione Vicat per es: DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
- Misure esatte di intervalli di misurazione dinamici e interpolazione
- Estensione il campo di misura della misura completamente automatizzata fino a tre carichi (per es: 100g & 300g & 1000g)
- Bassi costi di installazione perché non c'è collegamento dell'acqua

- Allarme regolabile se superano o scendono al di sotto della tolleranza
- Pulizia completamente automatica del cono o ago
- Riconoscimento automatico errore nella massa di prova
- Acquisizione di dati esterni per l'archiviazione
- Esportazione di dati tutti i principali database

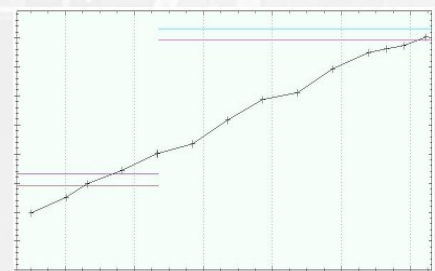

Rappresentazione grafica di ciascun



AVM-15²-P

- Misura simultanea di 15 campioni
- Due carichi (per es: 100g & 1000g)
- Prodotti con consistenza liquida e solida
- In piedi scrivania
- PC-sistema & software
- Sistema stand L:800 P:1050 H:1750(2300)mm


AVM-15³-P

Identico AVM-15², tuttavia:

- Tre carichi
(per es: 100g & 300g & 1000g)

AVM-Temp

Bagno a temperatura per AVM-15^x

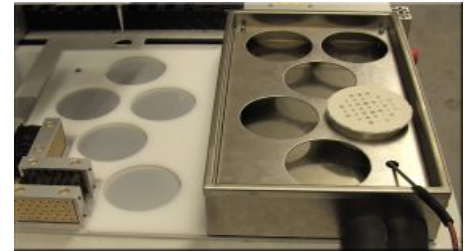

- La tempera +5°C a +50°C
- Continua di livello
- Facile installazione e rimozione

AVM-Temp-6

6 temperatura del campione / 5 al di fuori

AVM-Temp-10

10 temperatura del campione




AVM-10²

- Misura simultanea di 10 campioni
- Due carichi (per es: 100g & 1000g)
- Prodotti con consistenza solida
- PC-sistema & software
- Sistema di tavoli L:780 P:850 H:750(1300)mm

AVM-Hum-10

Misurare con il 95% di umidità in AVM-10^x (ASTM C 191)

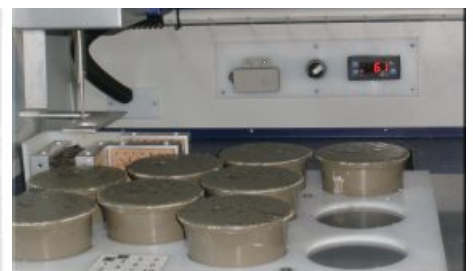

- Regolabile fino a +95% di umidità relativa
- Realizzazione rapida di set di umidità

Opzioni di misura

■ AVM-10² / AVM-15²

- Cono 100g & 1000g
- Cono / Ago 100g & 300g
- Ago 300g & 1000g
- Individualmente 100-300g & 300-3000g

■ AVM-15³

- Cono / Ago 100g & 300g & 1000g
- Individualmente 100g & 300-400g & 500-3000g