

**F**irma Dettki jest skromny i sukces firmy i ma ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie techniki pomiarowej Vicata.

**Serwis dla klienta ma wysoki priorytet:**


- 24h wsparcie przez techników
- Rozpatrzenie indywidualnych wymagań klienta
- Ciągły rozwój
- Umowy konserwacyjne o zmiennej (opcjonalnie)

Nasze systemy wynosi trudno sobie wyobrazić wiat, w kontroli jakości oraz badań i rozwoju z dala. Stwarzają wrażenie ciągłego niezawodności i precyzji.

**Wyjątkowość jest nasza metoda pomiaru rozszerzyć zakresie pomiarowym więc masz dużo więcej wgląd w zachowania nastaw.**




Stożek

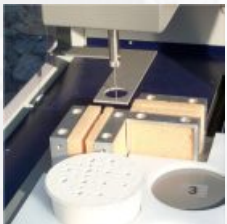

Igła

- Produkty z różnych czasów ustawień mierzone równocześnie
- Pracuje sam pomiar, Luki są zamknięte, Ujawnione wady jakościowe na czas
- Precyzyjne, natychmiast porównywalne wyniki pomiarów (Pomiar Vicat np.: DIN1168, EN13279-2, prEN 460-2, ASTM C191)
- Dokładne pomiary dynamicznym odstępach pomiarowych i interpolacji
- Rozszerzenie zakresu pomiaru przez całkowicie zautomatyzowane pomiaru z maksymalnie trzech obciążzeń (np.: 100g & 300g & 1000g)
- Niskie koszty instalacji, ponieważ nie wymaga przyłącze wody
- Regulowany alarm, jeśli przekracza lub spada poniżej tolerancji
- W pełni automatyczne czyszczenie sondy
- Automatyczne wykrywanie błędów do masy próbnym
- Pozyskiwanie danych zewnętrznych do archiwizacji
- Eksport danych do wszystkich głównych baz danych

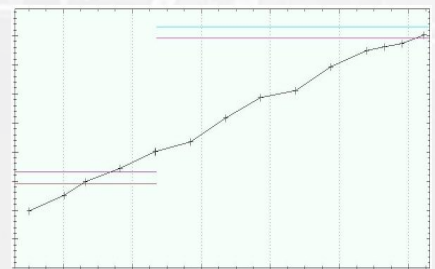

Graficzne przedstawienie każdej próbki



## AVM-15<sup>2</sup>-P

- Jednoczesny pomiar z 15 próbek
- Dwa ładunki (np.: 100g & 1000g)
- Produkty o płynnej i stałej konsystencji
- Stojąc biurko
- PC i oprogramowanie systemowe
- Systemu stoją szer:800 głęb:1050 wys:1750(2300)mm

## AVM-15<sup>3</sup>-P

Identyczny AVM-15<sup>2</sup> jednakże:

- Trzy ładunki (np.: 100g & 300g & 1000g)

## AVM-Temp

Kąpiele temperatury dla AVM-15<sup>x</sup>



- Temperatury +5°C do +50°C
- Bezstopniowy wysokość
- Modułowy zestaw dla łatwy montaż i demontaż

## AVM-Temp-6

Próbka kontrolowana temperatura 6 / 5 poza

## AVM-Temp-10

Próbka kontrolowana temperatura 10




## AVM-10<sup>2</sup>

- Jednoczesny pomiar z 10 próbek
- Dwa ładunki (np.: 100g & 1000g)
- Produkty o stałej konsystencji
- PC i oprogramowanie systemowe
- System stołowy szer.:780 głęb.:850 wys.:750(1300)mm



## AVM-Hum-10

Zmier się z 95% wilgotności w AVM-10<sup>x</sup> (ASTM C 191)

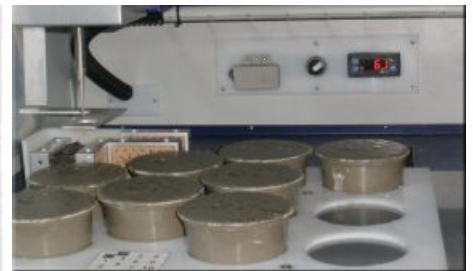

- Regulowana do 95% wilgotność względna
- Szybkie osiągnięcie Zestaw wilgotność

## Opcje pomiarowe

### ■ AVM-10<sup>2</sup> / AVM-15<sup>2</sup>

- Stożek 100g & 1000g
- Stożek / Igła 100g & 300g
- Igła 300g & 1000g
- Indywidualnie 100-300g & 300-3000g

### ■ AVM-15<sup>3</sup>

- Stożek / Igła 100g & 300g & 1000g
- Indywidualnie 100g & 300-400g & 500-3000g